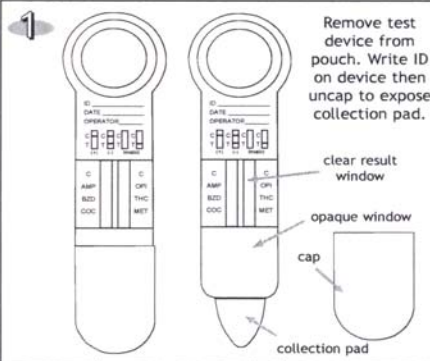
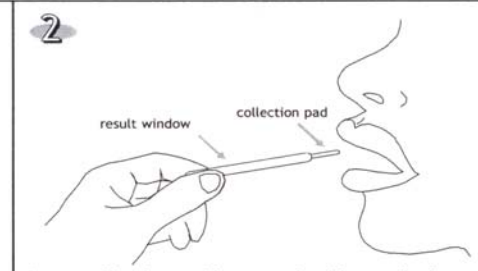

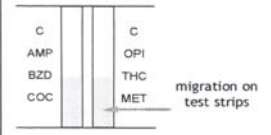
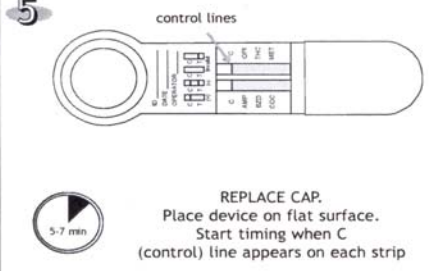
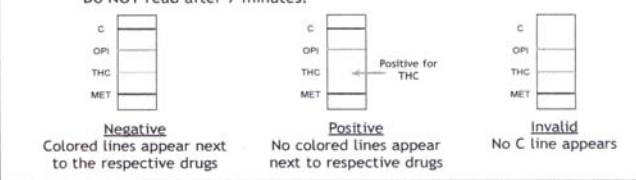


SCHEDA RAPIDA SALIVA TEST MULTIDROGA ORAL-VIEW™

ORAL-VIEW® Saliva Multi-Drug of Abuse Test PROCEDURE CARD

<p>1</p>  <p>Remove test device from pouch. Write ID on device then uncap to expose collection pad.</p> <p>clear result window</p> <p>opaque window</p> <p>cap</p> <p>collection pad</p>	<p>2</p>  <p>result window</p> <p>collection pad</p> <p>Insert collection pad into mouth with test device inserted under the tongue and with lips of mouth touching opaque window but not touching clear results window.</p>	<p>3</p>  <p>Do not bite, chew or pull on collection pad.</p>
<p>4</p> <p>Leave in mouth under the tongue. After 2 minutes, remove the device from the mouth. If you do not see a pink migration in the result window, put the device back in the mouth under the tongue for 1 additional minute then remove.</p>  <p>C OPI AMP BZD THC MET COC migration on test strips</p>	<p>5</p>  <p>control lines</p> <p>REPLACE CAP. Place device on flat surface. Start timing when C (control) line appears on each strip</p> <p>5-7 min</p>	<p>6</p> <p>Read results at 5-7 minutes after the C line appears on EACH strip. Do not compare one line intensity to another. Do NOT read after 7 minutes.</p>  <p>Negative Colored lines appear next to the respective drugs</p> <p>Positive No colored lines appear next to respective drugs</p> <p>Invalid No C line appears</p>



13200 Gregg Street, Poway, CA 92064
PH: 858-513-3888 • FAX: 858-513-8388
www.alfascientific.com • info@alfascientific.com
(English) 31-4262C

<p>Fig 1</p> <p>Rimuovere il dispositivo dalla confezione (se era conservata in frigo, prima di aprire portarla a temperatura ambiente). Scrivere l'identificativo del soggetto sul dispositivo. Togliere il cappuccio per esporre la linguetta assorbente.</p>	<p>Fig 2</p> <p>Inserire il dispositivo <u>nella bocca sotto la lingua e con le labbra appoggiate sul corpo plastico opaco</u>, facendo attenzione a non toccare la finestrella dei risultati.</p>	<p>Fig 3</p> <p>Non mordere, non masticare, non spingere la linguetta assorbente.</p>
<p>Fig 4</p> <p>Lasciarlo nella bocca sotto la lingua. Dopo 2 minuti togliere il dispositivo dalla bocca. Se nella finestrella non appare una colorazione rosa di circa 1-3 mm, dalla parte della linguetta, rimettere il dispositivo in bocca sotto la lingua per ancora 1 minuto e poi estrarlo dalla bocca. **</p>	<p>Fig 5</p> <p>Riposizionare il cappuccio. Appoggiare su una superficie in piano. Far partire il tempo di attesa partendo dal momento in cui appare la riga di controllo C per ciascuna droga</p>	<p>Fig 6</p> <p>Leggere i risultati dopo 5 -7 minuti dalla comparsa della riga di controllo C per ciascuna droga.</p> <p>NEGATIVO Appaiono le righe (anche deboli) a fianco delle droghe</p> <p>POSITIVO alla THC . La relativa riga colorata non appare</p> <p>NON VALIDO Non è comparsa la riga C di controllo</p>

**Significato della colorazione: è stata raccolta o meno sufficiente saliva.